

TÉCNICA DEL INHALADOR PRESURIZADO CON CÁMARA Y BOQUILLA

1 El/la niño/a debe unir las piezas de la cámara.




3 Más tarde, acoplar el inhalador a la cámara.




5 Luego, colocar en la boca la boquilla de la cámara, cerrando los labios y, después, pulsar una vez el inhalador con la cámara en horizontal.




7 En caso de nuevas dosis, que vuelva a agitar y repetir los pasos con un tiempo de 30 seg. a 1 min. entre cada dosis.

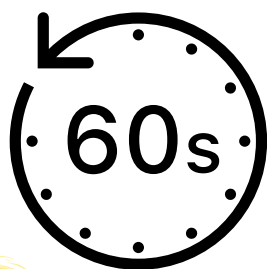


2 Luego, destapar el inhalador y agitarlo verticalmente.

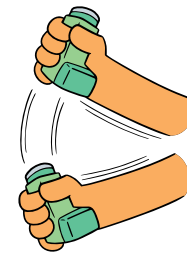

4 El/la niño/a debe soplar, expulsando el aire de los pulmones.

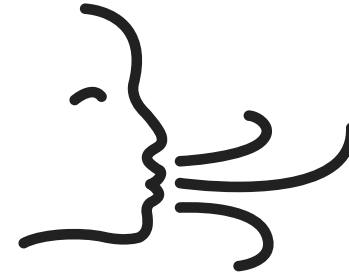

6 Más tarde, coger aire de manera profunda y lenta durante 5 seg., aguantar la respiración 10 seg. y expulsar el aire. Repetir esto de 2 a 5 veces.
En caso de niños/as pequeños, mantén la postura de la cámara mientras que el/la niño/a respira 5 veces, en cámaras grandes 3-4 veces, (comprobando el movimiento de la válvula) o espera 10 seg.

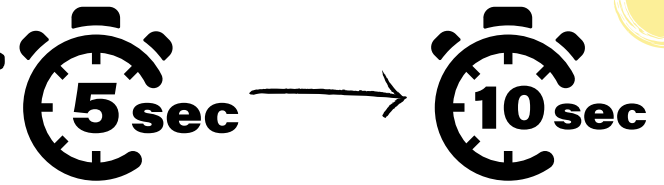

8 El/la niño/a debe retirar el inhalador de la cámara, taparlo y enjuagarse la boca.

