


# TÉCNICA DEL INHALADOR PRESURIZADO CON CÁMARA Y MASCARILLA

1

Sujeta adecuadamente al niño/a, destapa el inhalador y agítalo en posición vertical.

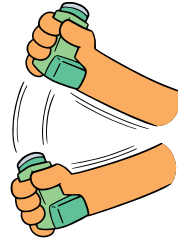


3

Sitúa la mascarilla ajustada alrededor de la nariz y boca del/la niño/a.



5

Mantén la postura de la mascarilla y cámara, esperando a que el/la niño/a respire 5 veces, con cámaras pequeñas 2 o 3 respiraciones (comprobando el movimiento de la válvula) o espera 10 segundos.

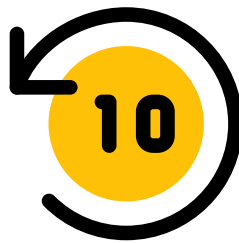

7

Retira el inhalador de la cámara y tápalo.

La cámara y la mascarilla se pueden lavar en agua caliente (ebullicionada) tras dejarla enfriar unos minutos. Pudiéndose añadir lejía en 1:10, es decir, muy diluida.



2

Encaja el inhalador con la cámara.



4

Presiona el inhalador, una vez, con la cámara en horizontal.



6

En nuevas dosis, vuelve a agitar y repita el proceso con un tiempo de 30 seg. a 1 min. entre cada dosis.



8

Lava la boca del/la menor con agua y parte de la cara que haya estado en contacto con la mascarilla.

