



TÉCNICA DEL SISTEMA TWISTHALER


1 El/la niño/a debe sujetar el inhalador verticalmente con la parte de color abajo.

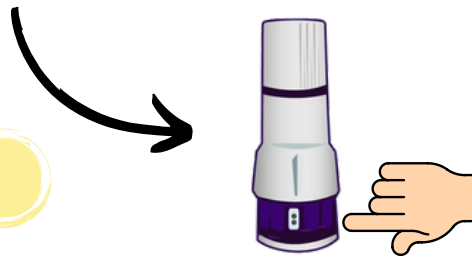

3 Más tarde, debe soplar expulsando el aire de los pulmones sin el inhalador.

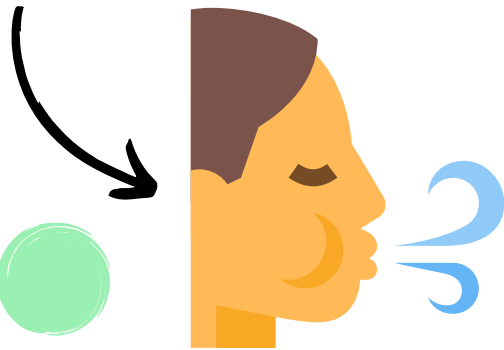


5 Luego, debe retirar de la boca el inhalador, sostener la respiración 10 seg. y, después, lentamente expulsar el aire.

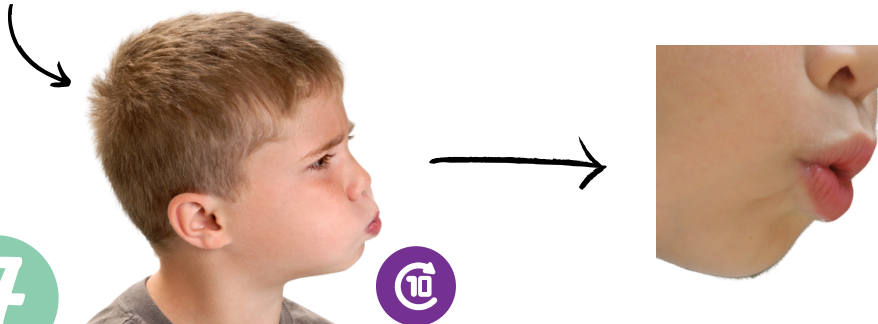

7 Más tarde, el/la menor debe lavar la boquilla y, después, poner la tapa coincidiendo la flecha de la misma con la ventanilla del contador de dosis. Luego, debe enroscarla en dirección de las agujas del reloj hasta escuchar un "clic".




2 Luego, debe girar la tapa en dirección contraria de las agujas del reloj para desenroscarla. Cargándose así la dosis y bajando las dosis que quedan.

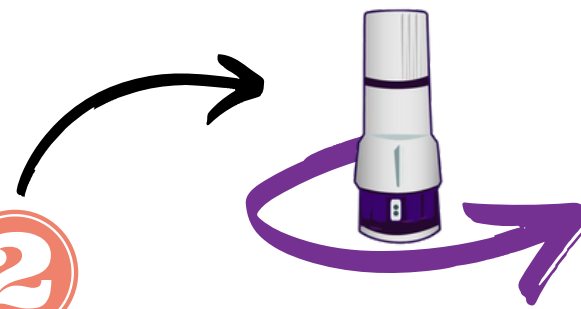

4 El/la niño/a debe acoplar bien entre los labios la boquilla para que no hayan fugas y, durante unos segundos, inhalar profundamente



6 En caso de nuevas dosis, que enrosque la tapa y vuelva a repetir el proceso desde el paso 2 con un tiempo de 30 seg. a 1 min. entre cada dosis.

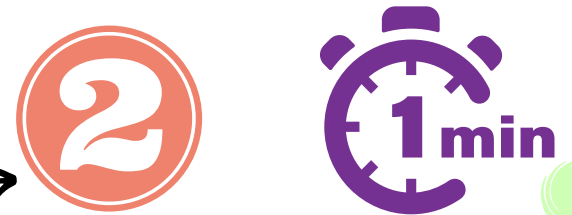

8 Finalmente, debe enjuagarse la boca guardando el inhalador en un sitio seco.

